



ウォッシャー ディスインフェクター
MAT LD1000

スリム&コンパクトなのに大容量!!

1回の処理でDINトレイ最大18枚
1回の処理でDINコンテナー6組

最新型MAT LD1000 の優位性



***省スペース化**
側面にメンテナンススペースが不要
なため、大幅な省スペース化が可能

大容量：

6段式ラックによりDINTレイ18枚の処理が可能です

生産性：

EN ISO15883でバリデーションされた標準工程は最短約45分で完了します

節水性：

1工程の水消費量は約25Lのため洗剤消費を削減できます

正確性：

フローメーターとレベルセンサーにより正確で安全な洗剤供給が可能です

操作性：

高精細な7インチタッチパネルスクリーンによる直感的な操作性により容易な操作が可能です

エルゴノミクスデザイン：

ラック搬入高さは750mmで、日本人にも使いやすい仕様です

静粛性：

60dBA以下

コンパクトサイズ：

横820mm×奥行940mmのスペースがあれば設置可能です

*省スペース化：

装置前面と背面からメンテナンスが行えるので幅2m以下のスペースに設置可能です

Washer Thermodisinfectant
Matachana MAT LD1000



	MAT LD1000-E1 MAT LD1000-M1	MAT LD1000-E2 MAT LD1000-M2
本体寸法(mm)：		
開口	820	820
高さ	1985	1985
奥行	936	936
有効内缶寸法(mm)：		
開口	705	705
高さ	690	690
奥行	850	850
有効内缶容量(L)	413	413
内缶容量(L)	492	492
容量	DINTレイ18枚 DINコンテナー6組	DINTレイ18枚 DINコンテナー6組
騒音	< 60 dBA	< 60 dBA
電源	200V/3Ø 50~60Hz 24kW	200V/3Ø 50~60Hz 24kW

最新型MAT LD1000 の製品特長

MAT LD1000は中央滅菌供給部門(CSSD)だけでなく、
日帰り手術センターや外来手術センターなどの再生業務における
洗浄と熱消毒の効率を追求して生まれた
全く新しいウォッシャーディスインフェクターです。

次世代のウォッシャーディスインフェクターである
MAT LD1000は処理容量の高さや設置面積を減少できるだけでなく、
使用電力や供給水の減少によりユーザーに大きなメリットをもたらします。

充実の標準装備

- ・ 前面に設置されたメインスイッチ
- ・ 自動圧力制御
- ・ 2つのLED電球による槽内照明
- ・ 7インチタッチスクリーンパネル
- ・ 洗浄槽及び洗浄回路には高品質のAISI 316Lを使用
- ・ 洗浄アームが簡単に取れてメンテナンスが容易
- ・ 上下移動式自動スライドドア
- ・ ペアガラスのドアの採用によりやけどの発生を予防
- ・ フローメーターとレベルセンサー付洗剤は10L容器で4種類まで装置可能
- ・ 40工程を超えるプログラムが選択可能
- ・ 給水・給湯に加えRO水の系統も確保
- ・ 高効率な乾燥システム
- ・ H14グレードのHEPAフィルターを使用
- ・ ウェブから工程のモニタリングが可能
- ・ 熱転写式プリンター
- ・ 工程・完了・エラー表示はタッチスクリーンとアラームで表示



ローディング／アンローディングシステム



マニュアルトrolleyシステム



オートマチック ローディング
／アンローディングシステム



自走式 AL10 ロボティックローディング
／アンローディングシステム




Washer Thermoisinfector
Matachana MAT LD1000

www.matachana.com

アクセサリ


ウォッシャーディスインフェクターMAT LD1000には
一般手術用器具、マイクロ手術用器具、麻酔科用器具及び研究施設向け器具を含んだ
あらゆる器具に対応したアクセサリを準備しています。

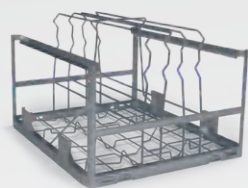

滅菌コンテナ用ラック




6段式ラック

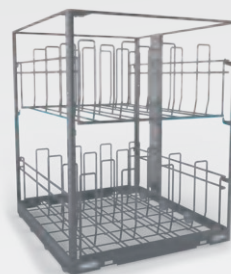


スリッパ用ラック




麻酔科用器具ラック

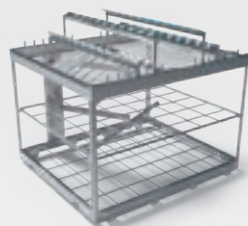


鏡視下手術用器具ラック

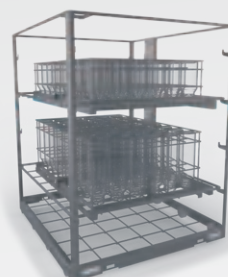

栄養ボトル用ラック

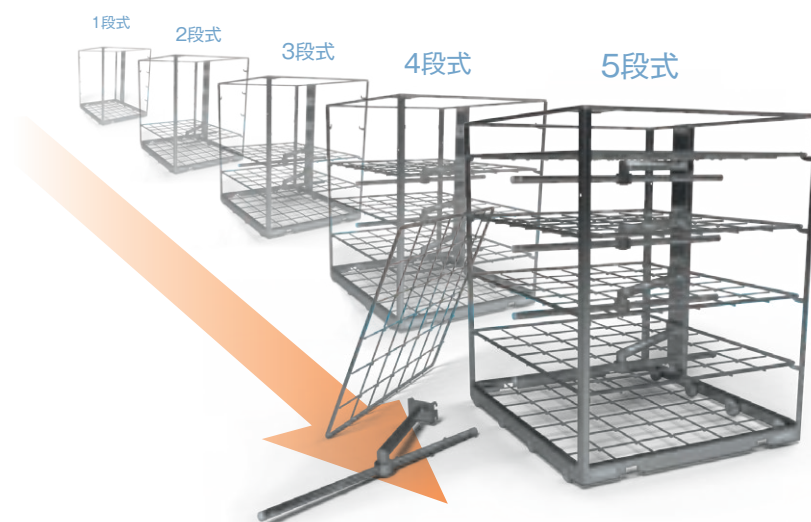

フレキシブル5段ラック
洗浄アームもラックも5段階に調整可能

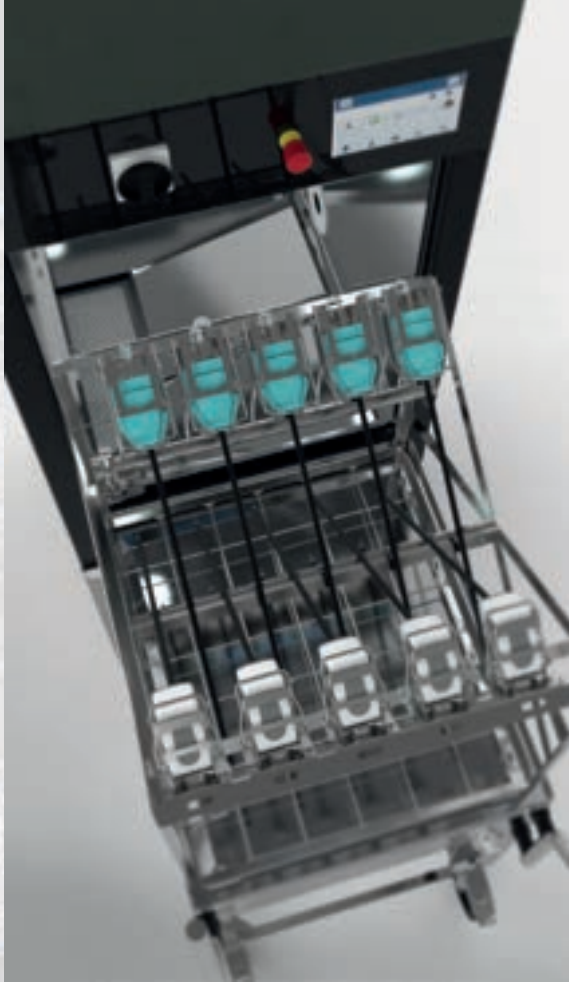

da Vinci® 用ラック



Washer Thermodisinfectior
Matachana MAT LD1000

www.matachana.com



マタチャナグループ

革新は進むべき道である

50年前の設立より、我々の信念はベストなサービスを提供すること、我々の知識と現場経験をお客様へ提供し日々を促進すること、それにより滅菌供給業務において高い品質を維持しつつ、より効率的に提供できるようにすることです。

その歴史は1962年に始まり、現在では、フランス、ドイツ、イタリア、米国、アルゼンチン、マレーシアに直接の拠点を構え、110以上の国々に直接取引の販売店を持つマタチャナグループとなりました。

マタチャナグループでは、トレーニングとサービスを提供することで、顧客満足度へ繋がると確信しました。そのため、我々は常にこの2つの分野の発展に投資し、お客様と直接連絡を取り、その成果をフィードバックすることで製品を発展させてきました。

品質

マタチャナ社はISO9001とISO13485を取得しています。

環境に優しい

本装置は省エネに特化した、最新の技術を用いてデザイン・製造されています。

- 製造販売届出番号：第13B2X00198000002号
- 一般的名称：器具除染用洗浄器
- 販売名：ウォッシャー ディスインフェクター MAT LD1000



本社・橋原工場認証取得

滅菌システムの専門メーカー

株式会社ウドノ医機

<https://www.udono.com>



●本社

〒192-0063 東京都八王子市元横山町2-1-9
TEL(042)642-6301 FAX(042)644-8350
営業部TEL(042)642-6153 FAX(042)642-4784

●橋原工場

〒193-0803 東京都八王子市橋原町1453-2
TEL(042)625-3661 FAX(042)627-6334

●橋原第二工場

〒193-0803 東京都八王子市橋原町1480-1
■医療機器製造業許可番号 13BZ002083/13BZ201693
■第二種医療機器製造販売業許可番号 13B2X00198
■ISO取得番号 ISO9001/ISO13485

東北営業所

〒030-0844 青森県青森市桂木1-4-28
TEL(017)774-6259 FAX(017)775-4012

名古屋営業所

〒486-0821 愛知県春日井市神領町3-2-4
TEL(0568)53-3636 FAX(0568)53-3637

大阪営業所

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-1-9
TEL(06)6330-1052 FAX(06)6330-1053

九州営業所

〒812-0015 福岡県福岡市博多区山王2-7-33
マルシン山王ビル
TEL(092)433-4155 FAX(092)433-4157

東京サービスセンター

〒192-0063 東京都八王子市元横山町2-1-9
TEL(042)642-6153 FAX(042)642-4784

仙台サービスセンター

〒981-0904 宮城県仙台市青葉区旭ヶ丘4-3-3
TEL(022)301-6166 FAX(022)301-6167

金沢サービスセンター

〒920-0005 石川県金沢市高柳町5-6-1
金沢SKビル14号室
TEL(076)254-5365 FAX(076)254-5629

岡山サービスセンター

〒700-0952 岡山県岡山市北区平田140-107
TEL(086)250-8473 FAX(086)250-8476

熊本サービスセンター

〒861-8006 熊本県熊本市北区龍田9-4-34 丸利ビル
TEL(096)215-8182 FAX(096)215-8183

東京サポートセンター

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-15
TEL(03)3830-0539 FAX(03)3830-0534